



Peak-flow Pinnacle™ DEBITMETRE DE POINTE

Des décennies d'expérience à concevoir, éprouver et améliorer des peak-flow ont permis d'obtenir cette génération du peak-flow Pinnacle™.

- Conçu spécialement pour répondre à la toute dernière norme dédiée au peak-flow : **ISO23747**
- Zones de couleur mobiles pour la gestion de l'asthme personnalisable selon les valeurs théoriques du patient
- Grande échelle de mesure, lisible très facilement
- Clapet anti-retour interne pour pallier efficacement les risques d'infections croisées
- Satisfait et dépasse toutes les normes de performance internationales
- Distribué par le spécialiste des peak-flow en France depuis 30 ans et fournisseur des professionnels de santé

FKmed

CS 69024- 69811 Tassin La Demi-Lune

Distribution



2, chemin du Vieux Moulin F-69160 Tassin La Demi-Lune
Tél 04 37 644 750 Mail contact@eolys.fr Web www.eolys.fr

Peak-flow Pinnacle™


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesures	60-900 L/Min EN13826 / ISO23747
Palier d'échelle	10 L/Min
Précision	+/-5% ou 10 L/Min
Reproductibilité	+/-2%
Calibration	100% (unité individuelle)
Fréquence réponse	c100Hz @ 350 L/Min
Etat dynamique	amorti critique @ 350 L/Min
Conformité normes	EN 13826 :2003 AS/NZ 4237 NAEP Guidelines 1991
Type exploration	expiratoire seulement

La conception avancée de ce peak-flow évite tout démontage pour en protéger l'intégrité du mécanisme, tandis qu'un **clapet anti-retour interne prémunit contre les infections croisées.**

Il vous est livré avec sa notice d'emploi et une grille de note des mesures faites pour un bon suivi longitudinal.

CE 0120

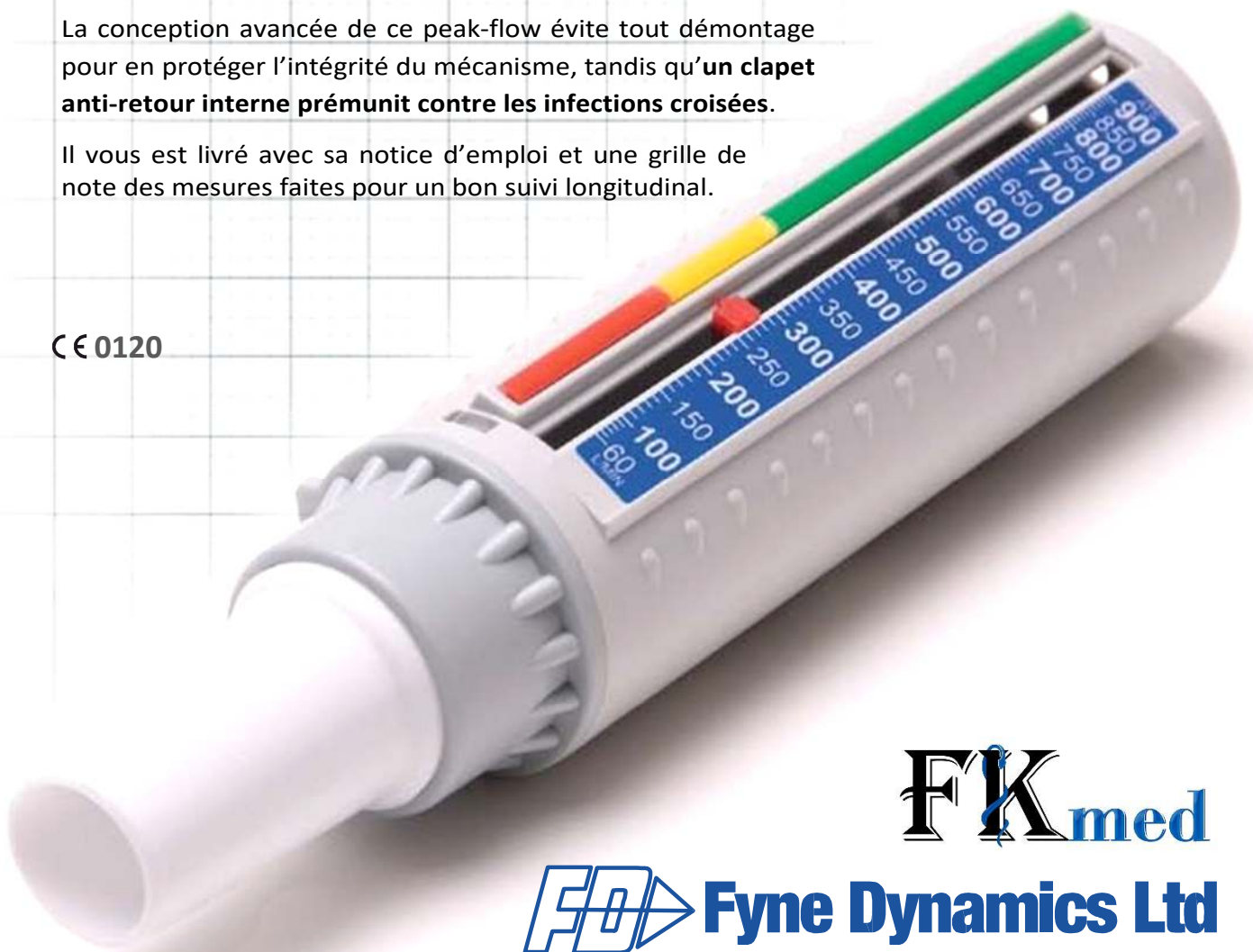

FKmed



Fyne Dynamics Ltd